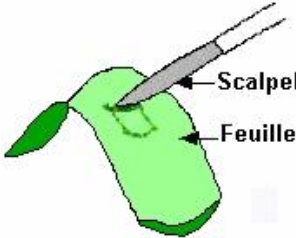
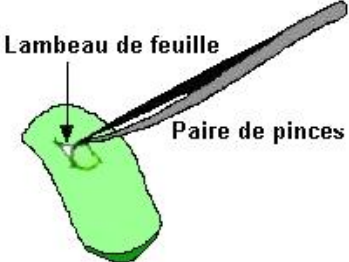
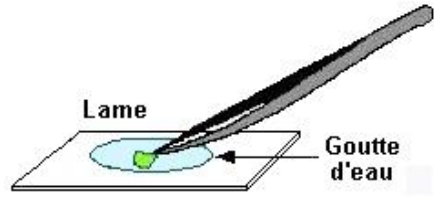
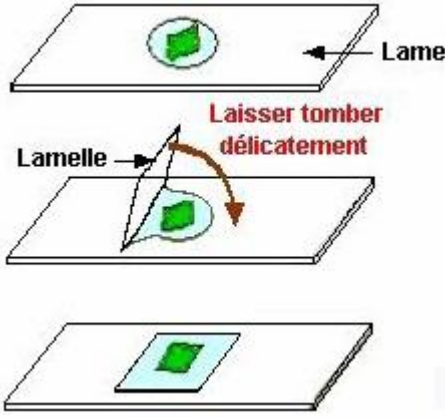
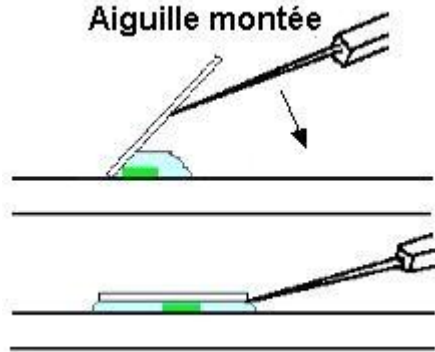
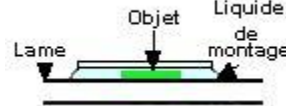

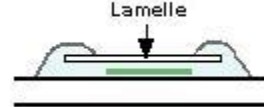


PRELEVEMENT D'UN FRAGMENT D'EPIDERME FOLIAIRE

Matériel		Colorants éventuels
<ul style="list-style-type: none"> - Scalpel, paire de pinces fines, paire de ciseaux fins, aiguille montée - Lame, lamelle - Eau 		<ul style="list-style-type: none"> - Rouge neutre - Eau iodée
Prélèvement et montage		
1 - Découper un petit carré d'épiderme (utiliser un scalpel ou une paire de ciseaux fins).	2 - Prélever le carré à l'aide d'une paire de pinces fines.	3 - Placer le carré dans une goutte d'eau préalablement déposée sur une lame.
 <p>Scalpel Feuille</p>	 <p>Lambeau de feuille Paire de pinces</p>	 <p>Lame Goutte d'eau</p>
4 - Déposer délicatement la lamelle sur la préparation. <i>(colorer éventuellement avant ou après montage, les vacuoles au rouge neutre ou les noyaux à l'eau iodée)</i>	4 bis - Pour déposer la lamelle, il est possible de s'aider d'une aiguille montée.	5 - Evaluer la qualité de la préparation
 <p>Lame Lamelle Laisser tomber délicatement</p>	 <p>Aiguille montée</p>	<div> Bonne préparation et bon montage  <ul style="list-style-type: none"> - objet mince et correctement étalé - liquide sous toute l'étendue de la lamelle bien horizontale </div> <div> Mauvaise préparation  <ul style="list-style-type: none"> - objet trop épais d'un côté - lamelle inclinée avec coin d'air d'un côté - liquide débordant de l'autre </div> <div> Mauvais montage  <ul style="list-style-type: none"> - trop de liquide débordant sur le dessus de la lamelle </div>